

# HX-3000 混匀小精灵

/// 样品混匀系列


样品混合系列

## /// 产品介绍

HX-3000 混匀小精灵是一款高效率、多功能、小巧精致、应用广泛的台式混匀仪，该仪器整合旋涡与振荡的功能和只能操作的设计理念，适用于多种混匀和旋涡振荡操作，它不仅混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材，还具备点动振荡混匀各种试管的功能。使操作更加简单、安全、方便。



///HX-A1

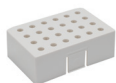

///HX-A2



///HX-A3



///HX-A4



///HX-A5

## /// 产品特点

- 完美的混匀半径与出色的二维混匀技术和可调式混匀速度相结合；
- 具有可编程功能，确保快速而完美地混匀多种样品；
- 直流无刷电机，长寿命，免保养。



预设各种程序适用不同实验要求



具备 Vortex 振荡混匀各种试管



多种适配器可兼容不同尺寸试管



LCD 显示可设置时间转速具备编程功能

## /// 产品技术参数

型号	HX-3000	噪音	<50dB
混匀频率	200~3000rpm	重量	7.9kg
点动振荡混匀频率	3500rpm	外形尺寸 (W×D×H)	220x300x170 (mm)
混匀时间	0s~99h59m	输入电源	AC100 ~ 230V, 50~60Hz
振幅	3mm	功率	45W

## 产品应用

快速可控混匀使不同批次间实验条件均一化，提高实验重复性。

### /// 可配置试管支架

HX-A1	96x0.2ml 离心管支架，适合 0.2ml PCR 管、PCR 排管、96 孔 PCR 板（半高裙边、无裙边）	HX-A4	8x10/15ml+3x5/7ml 离心管支架
HX-A2	24x0.5ml 离心管支架	HX-A5	6x50ml 离心管支架
HX-A3	24x1.5/2.0ml 离心管支架	备注	384 孔 PCR 板、微孔板、深孔板，可直接放入混匀，无需支架