

WH 系列恒温水浴槽

/// 温控系列

温控系列




///WH-10



///WH-5



///WH-2

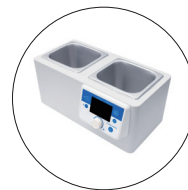

///WH-2A



///WH-3A

/// 产品介绍

恒温水浴槽是采用微电脑控制技术的多功能恒温水槽，被广泛应用于医药、生化、轻工、科研等领域。

/// 产品特点

- 一次冲压成型的不锈钢水槽，表面特氟龙处理，耐磨耐腐蚀。外壳采用性能优良的冷轧钢板，表面喷涂磨砂漆面，防生锈；
- 采用微电脑 PID 控制，温控线性好，精度高，波动小；
- TFT 大彩屏，参数设置一目了然，外形美观大方；
- 内置温度保护开关及光电液位传感器双重保护，安全可靠；
- 加热器采用浇筑加热板，与水槽地面完美贴合，温度均匀性佳。



TFT 显示 内置十组可编辑程序



过热保护



特氟龙涂层腔体，更耐腐蚀



温度均一性好 精度高

/// 产品技术参数

型号	WH-2	WH-2A	WH-3A	WH-5	WH-10
输入电源	AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz				
温控范围	室温 +5~100°C				
时间范围	1m~99h59m				
控温精度	±0.3°C				
均匀性	±0.3°C (37°C)				
容量	2L	2Lx2	2Lx3	5L	10L
功率	250W	500W	750W	550W	1000W
水槽尺寸 (W×D×H)	135x150x150 (mm)	2个 135x150x150 (mm)	3个 135x150x150 (mm)	155x300x150 (mm)	240x300x150 (mm)
外形尺寸 (W×D×H)	205x253x204 (mm)	415x253x204 (mm)	625x253x204 (mm)	205x395x210 (mm)	290x395x210 (mm)
重量 kg	2	4	5.5	3.5	4.8
排水方式	手动排水	排水泵		手动排水	排水阀
液位报警	有	有	有	有	有